

Naudojimo paskirtis ir indikacija


Mūsų kriukiai yra skirti žmonėms, turintiems lengvus judesenos sutrikimus esant judėjimo pažeidimui, pusiausvyros sutrikimui su pakankamai išlikusiu gebėjimu vaikščioti ir turintiems koordinacijos sutrikimus. Jie palaiko, skatina ir apsaugo ėjimą arba dalinį apatinės galūnės krūvio sumažinimą. Kriukiai gali būti naudojami viduje ir lauke. **Būtinai atsižvelkite į saugos įspėjimus!**

Kontraindikacijos

Kriukiai netinka netekus abiejų rankų galūnių arba esant abiejų rankų sąnarių kontraktūroms / pakenkimų sąnariuose.

Bendrieji saugos įspėjimai

Ant kriukio nekabinkite krepšy, maišelių ar kitų daiktų! Kriukio **jokiu būdu negalima naudoti kitiems tikslams**, pvz., kelti ar perstumti daiktus arba kaip pagalbinę priemonę spaudžiant šviesos jungiklius arba lifto mygtukus! Sukibimas su pagrindu lemia saugią kriukio atramą! Venkite drėgnų grindų arba pagrindo, pvz., žvyro, smėlio, lapų, ledo ar sniego! **Būkite atsargūs vietose, keliančiose tikimybę suklypti**, pvz., vietose su nelygumais, skylėmis grindyse, palaida grindų danga arba kraštais, nes kriukis gali netikėtai paslysti arba sulysti į kiurymes! Itin atsargiai reikia elgtis esant nepakankamoms apšvietimo sąlygoms, kadangi sunku pamatyti pagrindo nelygumus! Reguluojant mygtuką jis turi iki galo išsikišti iš angos (2 paveikslas)! Kriukio reguliavimo skylys šiek tiek dėvėsi. Reikia atsižvelgti, kad jos nebūtų išmuštos, nes tokiu atveju nebuvo užtikrinamas saugus mygtuko fiksavimas. Reguluojant spaustuką plastikinis spaustukas turi būti standžiai įstatytas (1 paveikslas)! Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar visos varžtinės jungtys priveržtos!

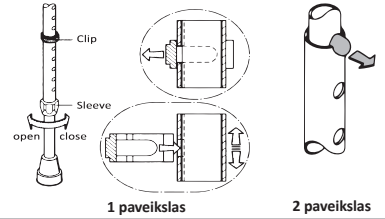


Kriukio reguliavimas



Įspėjimas! Dėl funkcinio ir ergonomiškai teisingo suregulavimo kreipkitės į specializuotą prekiautoją! Netinkamai sureguliuotas kriukis gali apriboti jo naudojimą arba sukelti per didelę arba netinkamą paciento apkrovą! Kriukis jums, kaip pacientui, perduodamas tinkamos būsenos, o jūsų specializuotas prekiautojas arba slaugos personalas jį individualiai sureguliuoja pagal jūsų kūną. Jei nesate užtikrinti, kad taip yra, kreipkitės į kompetetingus specialistus. Kriukis užtikrina pageidaujimą krūvio sumažinimą tik tada, jei yra optimaliai pritaikytas prie ūgio. **Reguliavimas** Jei jūsų kriukyje yra dantytoji veržlė, prieš reguliavimą ją reikia atsukti per maždaug pusę pasukimo prieš laikrodžio rodyklę (1 paveikslas). Atfiksukite aukščio reguliatorių įspausdami mygtuką arba išstumdami spaustuką. Pritaikykite kriukio ilgį prie savo ūgio ištraukdami arba sustumdami atraminį vamzdį. Vėl užfiksukite aukščio reguliatorių nukreipdami vamzdį taip, kad dvi fiksavimo angos būtų viena virš kitos – mygtukas vėl užfiksuoja. Reguluojant spaustuką iš naujo įstatykite spaustuką. **Sureguliuavus dantytąją veržlę vėl reikia priveržti** Reguluojamo aukščio kriukius apatinėje dalyje galima maks. 10 cm sutrumpinti. Nereguluojami kriukiai sutrumpinami nupjaunant atraminį vamzdį metalo pjūklui arba vamzčių pjautuvu ir individualiai pritaikant prie jūsų ūgio. **Atsargiai!** Pavojus nukristi atsilenkus kriukiui dėl netinkamai užfiksuoto aukščio reguliatoriaus! Po kiekvieno pritaikymo patikrinkite tinkamą fiksavimą bandydami kriukį persukti arba perstumti!

Naudojimas

Kriukio naudojimas gali labai skirtis ir priklausyti nuo individualaus gebėjimo vaikščioti apribojimo. Tegu specializuotas prekiautojas arba slaugos personalas jus instruktuoja, kaip naudoti kriukį! Kriukio negalima naudoti vandenyje. Prasiskverbus vanduo gali sukelti koroziją ir dėl to kyla didesnė įtrūkimo rizika. Reikia vengti nuolatinio kriukio sąlyčio su drėgme. Sudrekusį kriukį reikia atitinkamai išdžiovinti. Reikia šiek tiek įpratimo tinkamai prižiūrėti kriukį. Todėl iš pradžių rekomenduojame papildomai pasitarti su padedančiu asmeniu. Tačiau naudokite tik vieną kriukį, kuris visuomet turi būti kitoje pusėje nei sužeista koja arba koja, kuriai turi tekti mažesnis krūvis! Laikykite kriukį šalia kūno, o ne įstrižai į išorę (3 paveikslas)! Kitu atveju galite nukristi! Naudodami ranka visiškai ir tvirtai apimkite kriukio rankeną! Visada dėkite kriukį kiek įmanoma tiesiau ant pagrindo, kad jis nepaslystų! Sėdėjimui pasirinkite kėdės su atlošais rankoms. Atsistodami galėsite atsiremti į rankų atlošus! Dėvėkite kuo patogesnius plokščiapadžius batus, kad koja lengviau susitvarkytų su papildoma apkrova! **Jei vis dėlto parkristumėte** Leiskite kriukiui nukristi kiek galima labiau į šonus, kad neužkristumėte ant jo! Jei yra galimybė, tegu jus lydi padedantis asmuo, kad jis galėtų jus pagauti galimo kritimo atveju! Jei yra galimybė, paveskite specializuotiems darbuotojams jus instruktuoti, kaip lipti laiptais naudojant kriukį! Lipdami laiptais tik su vienu kriukiu, laisva ranka būtinai laikykites už turėklų (4 paveikslas)! Jei naudojate du kriukius, lipdami laiptais abu kriukius laikykite vienoje rankoje, o laisva ranka būtinai laikykites už turėklų (5 paveikslas)!

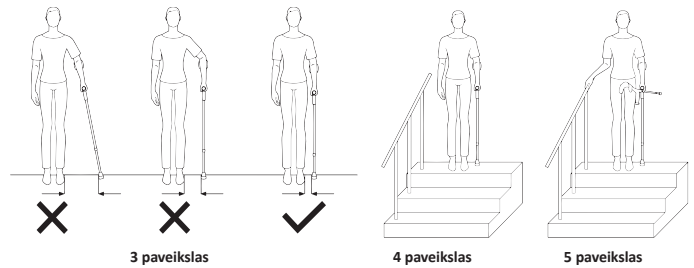

Atsargumo priemonės

Naudojant tik vieną kriukį pavienės kūno dalis veikia neįprastai didelis krūvis! Dėl to gali pasireikšti nepageidaujamas šalutinis poveikis Ant plaštakų gali susidaryti nuospaudos ir nusitrynimai! Atsižvelkite, kad tai iš pradžių arba esant ilgesnei apkrovai galimas skausmas ir persitempimas! Darykite pakankamai pertraukų!

Laikymas ir priežiūra

Niekada nelaikykite kriukio šalia šilumos šaltinių, pvz., krosnių, šildytuvų arba transporto priemonėje padėjimo vietoje! Saugokite kriukį nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio! Stiprūs saulės spinduliai arba karštis gadina plastiką! Saugokite savo kriukį nuo kritimo ir dažų pažeidimo (pvz., naudodami kilpas arba laikymo įmautes). **Guminis antgalis yra nusidėvėjęs dalis ir ją reikia reguliariai pakeisti.** Jei kriukis buvo ilgesnį laiką nenaudojamas, juo vėl galima naudoti tik tada, jei jį prieš tai patikrino specializuoti darbuotojai! **Įspėjimas!** Niekada nevalykite rankenos ir guminių kapsulių aliejingomis substancijomis! Pavojus paslysti! Nešvarumus nuo kriukio nuvalykite švelnia valymo priemone ir minkšta šluoste. **Niekada** nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, nes jie pažeis plastiką! **Nuoroda** Jei būtinas dezinfekavimas, naudokite tinkamą dezinfekavimo priemonę. Naudodami laikykites gamintojo rekomendacijų.

Naudojimo apribojimai

Kriukį galima veikti tik gamintoju nurodytu krūviu. **Atsižvelkite į ant gaminio nurodytą maksimalų leistiną kūno svorį!** Esant didesniai krūviui arba jei kyla abejonių kreipkitės į specializuotą prekiautoją. Jokiu būdu negalima naudoti deformuoto arba sugadinto kriukio, nes jis neužtikrina reikiamo stabilumo! Deformuoto kriukio negalima tiesinti, nes jis gali įtrūkti! **Nuoroda** Apie visus su gaminiu susijusius pavojingus incidentus reikia pranešti gamintojui ir kompetingai valstybės narės, kurioje naudojotas ir (arba) pacientas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, institucijai.

Pakartotinis naudojimas (nuoma) / naudojimo trukmė

Pagal įstatymą dėl atsakomybės už gaminis atsakomybę prisiimame tik už pirmą kartą pateikiamus į rinką mūsų gaminius. Pakartotiniam naudojimui pritariame tik tada, jei gaminį patikriname. **Kriukio naudojimo trukmė ribojama 2 metų laikotarpiu.** Po šio laikotarpio naudojant kriukį atsakomybė tenka naudotojui.

Garantija ir atsakomybė

Įsigijote aukštos kokybės „Ossenberg“ gaminį. Jei nepaisant aukštų kokybės standartų atsirastų pateisinamas materialinis defektas, per 12 mėnesių garantinį laikotarpį „Ossenberg“ turi teisę savo nuožiūra pataisyti sugedusį gaminį arba pakeisti defektų neturinčiu gaminiumi. Reikia atsižvelgti, kad mūsų užsakymams, ypač specialioms užsakymams taikomos griežtesnės teisinės nuostatos. Neprisimame atsakomybės už žalą, kuri susidarė pakeitus mūsų gaminius. Garantija netaikoma trūkumams dėl nusidėvėjimo arba netinkamos priežiūros. Garantija netaikoma nusidėvėjimams dalimis. Galima naudoti tik originalias atsargines dalis ir priedus! Dėl atsarginių dalių, priedų ir taisyso kreipkitės į specializuotus prekiautojus.

Šalinimas

Sužinokite iš specializuoto prekiautojo apie regioninius šalinimo reikalavimus.

Priedai

Leidžiamas atsargines dalis kriukiui rasti:
<https://shop.ossenberg.com/en/downloads-to-the-product/>



Simbolių sąrašas



Prekės numeris



Partijos numeris



Perskaitykite naudojimo instrukcija



Dėmesio



Gaminys atitinka Reglamento (ES) 2017/745 (MPR) reikalavimus



Gamintojas



Paskirstymas pagal



Pagamavimo data



Leidžiamas kūno svoris



Medicinos prietaisas

Ossenberg GmbH
Kanalstraße 79
48432 Rheine
VOKIETIJA

Telefonas +49 (0) 59 71-9 80 46 0
Faksas +49 (0) 59 71-9 80 46 1
Internetas www.ossenberg.com
El. paštas info@ossenberg.com



DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQ1 0115318



Naujausias naudojimo instrukcijas galite rasti adresu:
<http://bilder.ossenberg.com/Dokumente/Downloads-zum-Artikel/Gebrauchsanweisungen/PDF/Instructions-for-use-walking-sticks-LT.pdf>

Šis gaminys atitinka Medicinos prietaisų direktyvos rekomendacijas.
Be to, „Ossenberg GmbH“ yra sertifikuota pagal DIN EN ISO 13485.

State 08.07.2021

REF		A	B	C			
500	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
501	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
502	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	150 kg	Art. 13120	Art. 715
503	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	150 kg	-	Art. 970
505	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
506	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
507	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
508	Light metal walking stick unadjustable	A3	105 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
509	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	150 kg	Art. 13120	Art. 715
510	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	150 kg	-	Art. 970
645	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
646	Light metal walking stick unadjustable	A3	104 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
647	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
648	Light metal walking stick unadjustable	A3	102 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
655	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
656	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
669	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	120 kg	Art. 13120	Art. 715
670	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	120 kg	-	Art. 970
684	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
685	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
691	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	120 kg	Art. 13120	Art. 715
692	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
693	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	74 cm- 94 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
694	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
695	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
697	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	120 kg	-	Art. 970
3296	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11001/11002/11005/11006	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11001-1/11002-1/11005-1/11006-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11003/11004/11007/11008/11011/11012/11015/11016/11019/11020	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11003-1/11004-1/11007-1/11008-1/11011-1/11012-1/11015-1/11016-1/11019-1/11020-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11009/11010/11013/11014	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11009-1/11010-1/11013-1/11014-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11017/11018/11021/11022	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11017-1/11018-1/11021-1/11022-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11027/11028	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11029/11030/11031/11032/11033/11034	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11301/11302/11305/11306	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11301-1/11302-1/11305-1/11306-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11303/11304/11307/11308/11311/11312/11315/11316/11325/11326	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	74 cm- 94 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11303-1/11304-1/11307-1/11308-1/11311-1/11312-1/11315-1/11316-1/11325-1/11326-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11309/11310/11313/11314	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11309-1/11310-1/11313-1/11314-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11317/11318/11321/11322	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	130 kg	Art. 13120	Art. 715
11317-1/11318-1/11321-1/11322-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	130 kg	-	Art. 970
11601/11602/11603/11604	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11601-1/11602-1/11603-1/11604-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
11605/11606/11607/11608/11609/11610	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11605-1/11606-1/11607-1/11608-1/11609-1/11610-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
11611/11612/11613/11614/11615	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11611-1/11612-1/11613-1/11614-1/11615-1	Light metal walking stick unadjustable	A3	103 cm	19 mm	100 kg	-	Art. 970
11631/11632	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
11633/11634/11635/11636	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	75 cm- 95 cm	16 mm	100 kg	Art. 13120	Art. 715
3321/3322	Light metal walking stick adjustable	A2	85 cm- 108 cm	19 mm	180 kg	Art. 13123	Art. 719
691 - KIDDY	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	54 cm- 74 cm	16 mm	120 kg	Art. 13120	Art. 716
693XL/695XL	Light metal walking stick adjustable	A1 / A2	86 cm- 106 cm	19 mm	160 kg	Art. 13123	Art. 719

