

**STÖCKE FÜR ARTHRIKER Art. 0655**

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**Verwendungszweck**

Diese Stock ist ein **medizinisches Gerät der Klasse 1** und ist eine Gehilfe. Dieser Stock ist für Benutzer mit Handgriffschwierigkeiten, Handgelenks- oder Handbeschwerden konzipiert, die die Verwendung normaler Krücken nicht zulassen. Mit diesem Stock wird das Körpergewicht auf den Unterarm abgegeben, ohne Hand und Handgelenk zu belasten (Abbildung 1). Bei paarweiser Anwendung ist es möglich, das gesamte Körpergewicht auf zwei Stöcke zu entladen.

Die Verwendung des Stocks erfordert eine Schulung durch qualifiziertes Personal.

**Kontraindikationen und Warnungen**




Die Eignung zur Verwendung dieser Hilfsmittel muss vom Gesundheitspersonal beurteilt werden, insbesondere bei Personen, die an psychomotorischen oder motorischen Koordinationsstörungen leiden.

Bei diesen Personen kann ein längerer Gebrauch Probleme in den Gelenken des Arms verursachen, der das Hilfsmittel verwendet. Wenn Sie Schmerzen in Hand, Handgelenk, Ellbogen oder Schulter verspüren, es ist ratsam, die Hilfe abzubrechen und einen Arzt aufzusuchen.

Nicht in direktem Kontakt mit verletztem Gewebe Verwenden.

Achten Sie auf nassen und rutschigen Oberflächen.

**Verwenden Sie NIEMALS ein beschädigtes Gerät.**

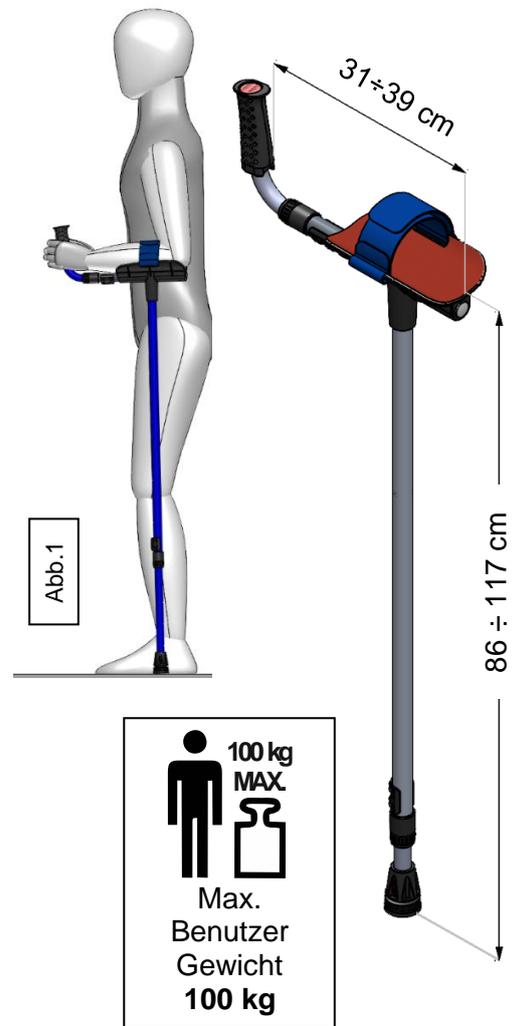

**STOCK EINSTELLUNG**

Der Stock ist in der Höhe und in der Länge der Unterarmstütze verstellbar. Neben der Körpergröße hängt die Einstellung auch vom Komfort und der subjektiven Manövrierfähigkeit des Benutzers ab. Es müssen drei Anpassungen vorgenommen werden (siehe Abbildung):

**1) Höhen Einstellung (Abb.2):**

- Lösen Sie die Verriegelungsfeder (1). **Verwenden Sie keine Werkzeuge, sondern nur Ihre Hände** (Abb.2b);
- Lösen Sie den Befestigungsring (2);
- Passen Sie die Länge an, indem Sie das Rohr entfernen (3);
- Umstellen Sie die Verriegelungsfeder (4);
- Ziehen Sie die Ringmutter fest (5).

**2) Einstellung des Unterarmgriffs:**

Das Einstellverfahren ähnelt dem der in Abb.2 angegebenen Höhe.

**3) Einstellung des Unterarmgurts:**

Fassen Sie den Stock, stellen Sie den Gurt nach Bedarf ein und verriegeln Sie alles mit dem Klettverschluss (Abb.3).

**WIEDERVERWENDUNG**

Das Hilfsmittel kann nach Überprüfung der strukturellen Integrität, Fehlen von Defekten, Hygiene, Austausch von Spitzen, Griff und Unterarmstützpolster.

**INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG**

**Austausch der Spitzen:** Die Stützspitzen unterliegen Verschleiß. Zur sichereren Verwendung regelmäßig durch Originalersatzteile ersetzen.

**Reinigung:** Reinigen Sie den Griff regelmäßig mit Wasser und neutralen Seifen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

**Desinfektion:** Verwenden Sie des Griffs Desinfektionsmittel auf Natriumhypochloritbasis in geringen Konzentrationen.

